


EXBAG®

SAC À EXTRACTION

Pour récupération de pièces opératoires

► Présentation technique

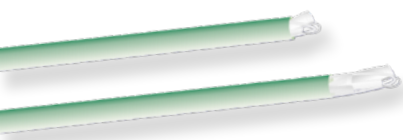


Trocart et poussoir

- Introduction et largage facilités



Sac en polyuréthane

- Imperméable et étanche
- Robuste : Résistance à la traction et à la pression
- Transparent : Bonne visibilité du prélèvement

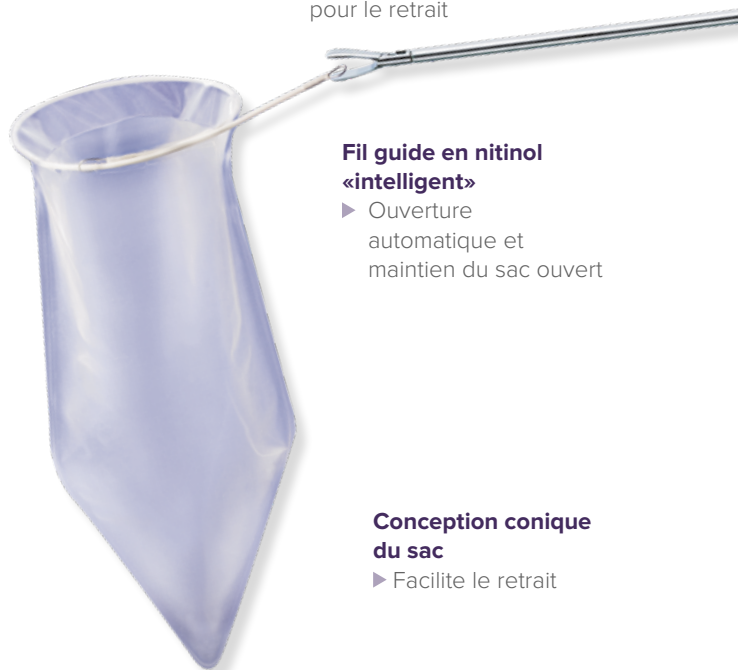

Boucle

- Permet la préhension et l'attachement d'un fil pour le retrait

Fil guide en nitinol «intelligent»

- Ouverture automatique et maintien du sac ouvert

Conception conique du sac

- Facilite le retrait

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	VOLUME	OUVERTURE	Ø TRO CART	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
EXBAG® SAC À EXTRACTION	200 ml	50 mm	10 mm	222351	MEB-01-10-200
	400 ml	90 mm	10 mm	222352	MEB-01-10-400
	800 ml	100 mm	10 mm	222353	MEB-01-10-800
	800 ml	100 mm	12 mm	222354	MEB-01-12-800

Conditionnement : Carton de 5 unités



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

