



SETS DE CYSTO GASTROSTOMIE


Sets pour ponction de pseudo-kyste

► Présentation technique

Les cysto-gastro-sets sont utilisés avec un courant haute fréquence pour **ponctionner des kystes pancréatiques ou des pseudo-kystes par voie endoscopique** comme alternative aux traitements chirurgicaux ou percutanés.

► Indications

- Kystes pouvant évoluer vers une tumeur maligne
- Prévenir un cancer
- Symptômes cliniques (saignement, occlusion)

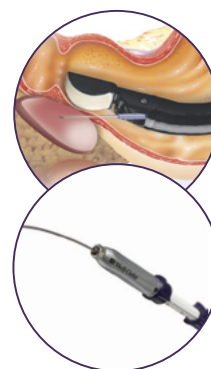


SET DE CYSTO-GASTROSTOMIE INDIQUÉ POUR LA PONCTION DE PSEUDO-KYSTE

La paroi stomacale ou duodénale et le kyste doivent être **préalablement perforés par une aiguille EUS ou sous guidage echo-endoscopique et fluoroscopie**. Durant la procédure, le kyste est ponctionné par l'aiguille couteau puis dilaté grâce au cathéter (8,5 Fr ou 10 Fr).

DÉSIGNATION	LONGUEUR	Ø EXTERNE CATHÉTER	FIL GUIDE COMPATIBLE	Ø CANAL OPÉRATEUR MINIMUM	FREQUENCE HF RECOMMANDÉE	RÉFÉRENCES	
						Cmde	Produit
SET POUR PONCTION DE PSEUDO-KYSTE - CYSTO-GASTROTOMIE	180 cm	8,5 Fr	0,025 inch	3,2 mm	80-120 watts	222631	E30008341
		10 Fr	0,035 inch	3,7 mm		222630	E30010340

Conditionnement : emballage unitaire

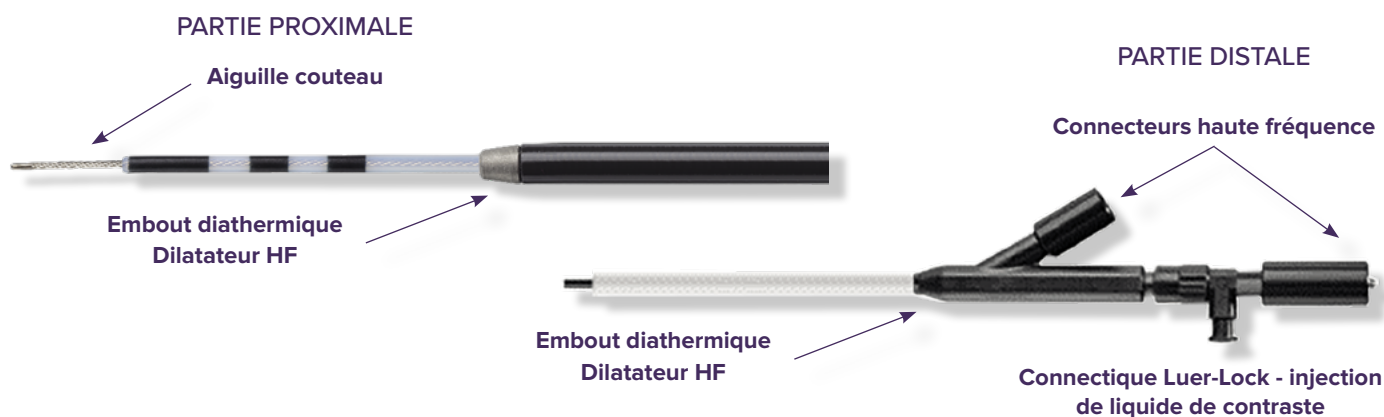

SET DE CYSTO-GASTROSTOMIE

La paroi stomacale ou duodénale et le kyste peuvent être **directement perforés avec le cathéter de l'appareil.**

DÉSIGNATION	LONGUEUR	Ø EXTERNE CATHÉTER	FIL GUIDE COMPATIBLE	Ø CANAL OPÉRATEUR MINIMUM	FREQUENCE HF RECOMMANDÉE	RÉFÉRENCES	
						Cmde	Produit
SET POUR PONCTION DE PSEUDO-KYSTE - CYSTO-GASTROTOMIE	180 cm	6 Fr	0,035 inch	2,8	80-130 watts	222632	E30006345

Conditionnement : emballage unitaire



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
 +33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

