

# HEMO<sup>®</sup>CLIP

## CLIP HÉMOSTATIQUE

Hémostases endoscopiques et repérage

### ► Présentation technique

#### Molette

- Fluidité et réactivité de la rotation
- Manipulation ambidextre

#### Poignée ergonomique

- Prise en main et manipulation aisées

#### Mors et poignée


- Synchronisés pendant la rotation
- Excellente maniabilité et orientation

#### Repositionnable

- Permet plusieurs ajustements avant la fixation finale

#### Clip

- Repositionnable
- Plusieurs diamètres d'ouverture : 9, 11, 12, 13, 16 mm

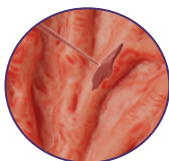

## ► Usages revendiqués

Les hémostases pour les ulcères hémorragiques.

Les polypes de diamètre inf. à 1.5cm.

Fermeture de perforations du tractus gastro-intestinal de moins de 20mm pouvant être traité directement.

Ancrage afin de fixer une sonde d'alimentation à la paroi de l'intestin grêle.

Marquage endoscopique car les clips sont radio-opaques.

## LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	OUVERTURE	LONGUEUR UTILE	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
HÉMO <sup>®</sup> CLIP GASTROSCOPIE	9 mm	165 cm	2,6 mm	222579	MCS-09-26-165
	11 mm			222581	MCS-11-26-165
	12 mm			222583	MCS-12-26-165
	13 mm			222585	MCS-13-26-165
	16 mm			222587	MCS-16-26-165
HÉMO <sup>®</sup> CLIP COLOSCOPIE	9 mm	230 cm	2,6 mm	222580	MCS-09-26-230
	11 mm			222582	MCS-11-26-230
	12 mm			222584	MCS-12-26-230
	13 mm			222586	MCS-13-26-230
	16 mm			222588	MCS-16-26-230

Conditionnement : boîte de 10 unités



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives  
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



**SCANNEZ**  
POUR ACCÉDER AU  
CONTENU EN LIGNE  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

